


Manuel d'utilisation


Page d'accueil du chercheur :

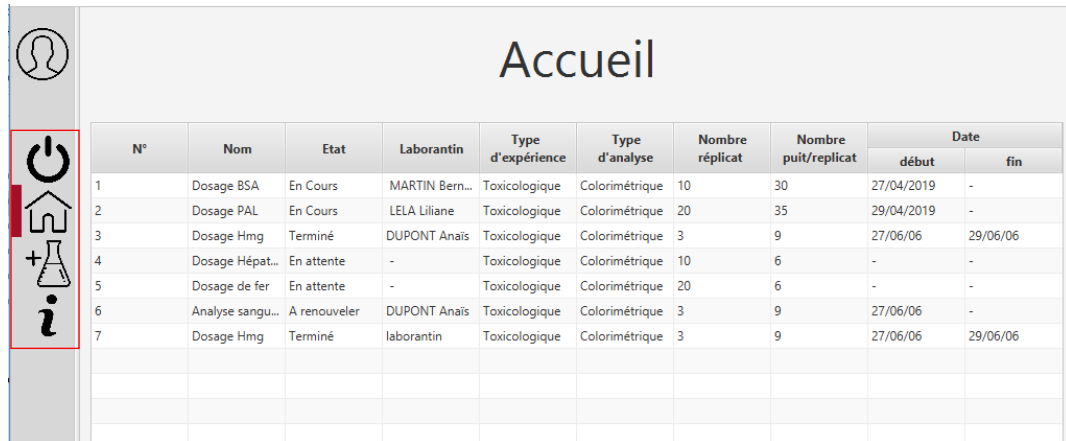

N°	Nom	Etat	Laborantin	Type d'expérience	Type d'analyse	Nombre réplikat	Nombre puit/replicat	Date	
								début	fin
1	Dosage BSA	En Cours	MARTIN Bern...	Toxicologique	Colorimétrique	10	30	27/04/2019	-
2	Dosage PAL	En Cours	LELA Liliane	Toxicologique	Colorimétrique	20	35	29/04/2019	-
3	Dosage Hmg	Terminé	DUPONT Anaïs	Toxicologique	Colorimétrique	3	9	27/06/06	29/06/06
4	Dosage Hépat...	En attente	-	Toxicologique	Colorimétrique	10	6	-	-
5	Dosage de fer	En attente	-	Toxicologique	Colorimétrique	20	6	-	-
6	Analyse sangu...	A renouveler	DUPONT Anaïs	Toxicologique	Colorimétrique	3	9	27/06/06	-
7	Dosage Hmg	Terminé	laborantin	Toxicologique	Colorimétrique	3	9	27/06/06	29/06/06

- Celle-ci recense toutes les expériences que le chercheur a créé. Il peut voir le nom de l'expérience, son état, le laborantin qui l'a pris en charge, le type d'expérience (immunologique ou toxicologique), le type d'analyse (colorimétrique ou opacimétrique), le nombre de répliquats demandé ainsi que le nombre de puits par réplikat. Enfin, il pourra voir la date de début de l'expérience et de fin. Cet accueil va permettre au chercheur de voir l'avancée de ces expériences.
- Depuis la page d'accueil, le chercheur peut se déconnecter ou ajouter une nouvelle expérience.

Ajouter une nouvelle expérience :

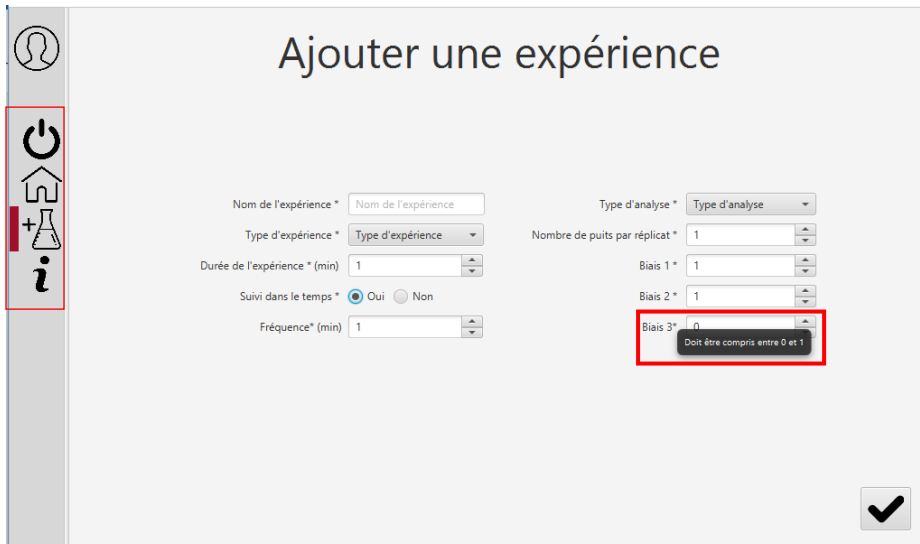

Ajouter une expérience

Nom de l'expérience *

Type d'expérience *

Durée de l'expérience * (min)

Suivi dans le temps * ☒ Oui ☐ Non

Fréquence* (min)

Type d'analyse *

Nombre de puits par réplikat *

Biais 1 *



Biais 2 *


Biais 3 * Doit être compris entre 0 et 1

☒

- Il doit remplir le nombre de puits par réplikat, le type de plaque, la durée de l'expérience, le type d'expérience, le type d'analyse, les biais 1 et 2. Si l'expérience est suivie dans le temps, alors il devra aussi remplir la fréquence et le biais 3. Des messages d'informations sont affichés lorsque l'utilisateur clique sur un champ. Par

exemple, pour le biais 3, le message indique que la valeur doit être comprise entre 0 et 1.

- Après avoir ajouté une expérience, une page 'ajouter un réplicat' apparaît. Un récapitulatif de l'expérience (**cadre rouge**) qu'il vient de créer sera présent pour lui permettre de se rappeler de l'expérience. Il pourra ensuite ajouter un réplicat (**cadre violet**) en remplissant le type d'agent biologique, le type cellulaire ainsi que leurs quantités et en cliquant sur . Le tableau permet d'avoir un récapitulatif des réplicats ajoutés (**cadre bleu**). L'utilisateur peut cliquer sur  pour valider les réplicats et l'expérience. Ensuite il retourne automatiquement sur la page d'accueil.

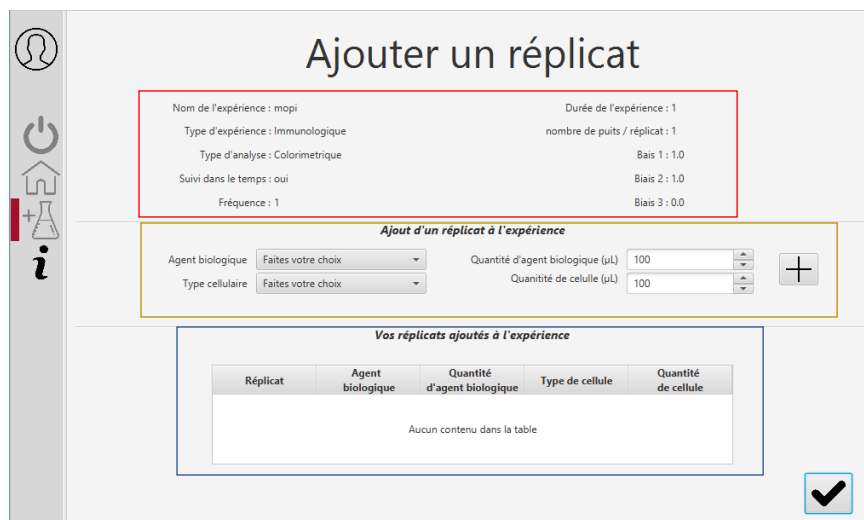

Ajouter un réplicat

Nom de l'expérience : mopi

Type d'expérience : Immunologique

Type d'analyse : Colorimetrique

Suivi dans le temps : oui

Fréquence : 1

Durée de l'expérience : 1

nombre de puits / réplicat : 1

Biais 1 : 1.0

Biais 2 : 1.0

Biais 3 : 0.0

Ajout d'un réplicat à l'expérience

Agent biologique

Faites votre choix

Quantité d'agent biologique (µL)


100

Type cellulaire

Faites votre choix

Quantité de cellule (µL)

100



Vos réplicats ajoutés à l'expérience

Réplicat	Agent biologique	Quantité d'agent biologique	Type de cellule	Quantité de cellule
Aucun contenu dans la table				

